



Soleoline



Soleo Sona

Soleoline, yüksek performans



Yüksek teknoloji ve 40 yıllık deneyimin usta bir birleşimi olan Soleoline, modern fizyoterapinin tüm ihtiyaçlarını karşılar.

**Sade
Ergonomik
Yüksek performanslı**



Geniş renkli dokunmatik ekran ve SD hafıza kartı ile Soleoline son derece rahat bir biçimde kullanılabilir ve kullanıcıları için tedavi kılavuzunda detaylandırılmıştır.

Soleoline cihazının 3 versiyonu mevcuttur:
Ultrason Terapisi, Elektroterapi ve Kombine Terapi.

Soleoline

Soleo **Sono**, Yenilikçi Ultrason Tedavisi



Özel programlar

Sono, son derece yüksek kaliteli,
çok frekanslı (0.8 ve 2.4 MHz)
ergonomik bir ultrason başlığı ile
birlikte gelir.

Önceden ayarlanmış fakat değiştirilebilen programlar, tedavilere kolay ve hızlı erişim sağlamanıza olanak sunar.



Sono *Swing* Butonu

Zimmer'in yenilikçiliği sayesinde, tedavide ultrason derinliği ayarlanabilir.

Bu ayarlama, son derece iyi hassaslık sağlar ve terapi uygulanırken tedavi sırasında da yapılabilir.



Endikasyonlar

Lokomotor sistemini etkileyen, ana durumlar ile ilgili detaylı tedavi önerilerini *Sono*'nun bir aksesuarı olarak SD kartta saklamak mümkündür.



Soleo Galva

Soleoline, Kullanıcı Dostu

Soleoline



Program





Kanal

Soleoline tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlandı:

- Hız:** Basit ve yenilikçi menüler üzerinden doğrudan erişim
- Sadelik:** Geniş, profesyonel biçimde tasarlanmış bir dokunmatik ekran
- Güvenlik:** Tüm tedavi parametreleri bir bakışta önünüzde

Sezgisel yazılımıyla Soleoline cihazını kullanmak kullanıcılar için gerçek bir keyiftir. Şıklığı ve kullanıcı dostu tasarımı, ona başarıyı getiren özelliklerindendir.

Soleo *Galva*, Modern Çok Kanallı Elektroterapi

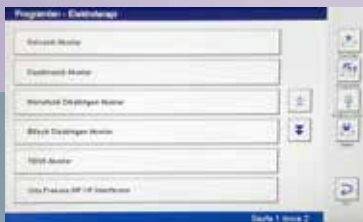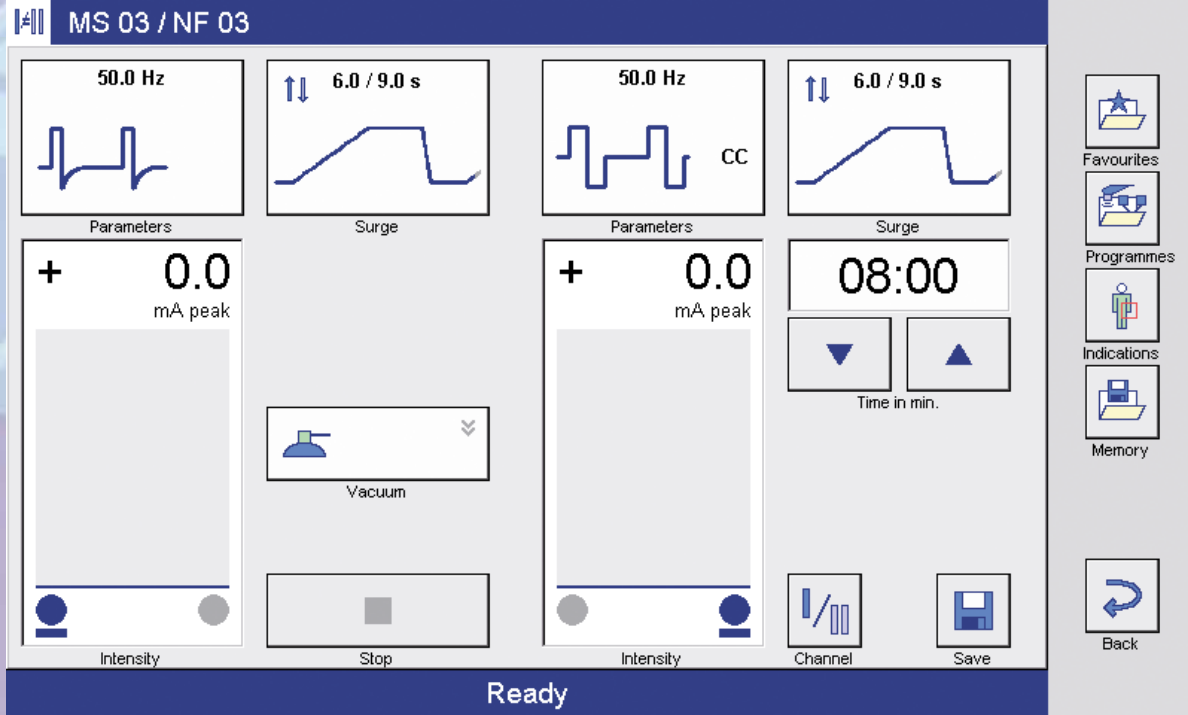

Özel programlar

Analjezik terapi, eksitomotor stimülasyonu ve metabolizma stimülasyonu için LF, MF, MF/LF ve IF de dahil mevcut tüm dalga şekilleri, programlar halinde mevcuttur. Akıllı program siparişi, doğru programın seçilmesini kolaylaştırır.




"Kanal" Menüsü

Basit bir dokunuş, kullanıcıya her elektroterapi tipine erişim sağlar:

- 1 veya 2 kanal
- Senkronize
- Alternatif
- Ayrı

Hızlı ve çok kanallı elektroterapi; Zimmer'den bir fikir!

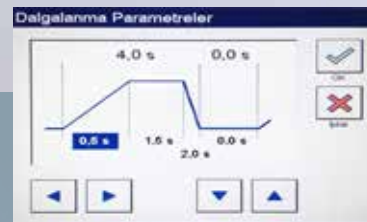

Kişiselleştirilmiş Tedavi

Her hastanın tedavisi kişiseldir.


Artık aktif pencereleri kullanarak parametreleri birkaç saniye içinde değiştirmek veya uyarlamak mümkündür. Daha sonra ihtiyaç duyulması halinde bu parametreleri SD kartta depolayabilirsiniz.




Soleo Sonastim

Soleoline, Hassas

Soleoline tüm yüksek performanslı terapi aletlerini elinizin altına getirir.

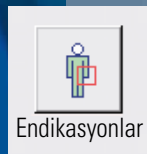

Endikasyonlar

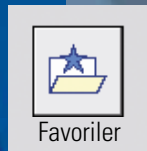


Favoriler

- Etkinlik :** Detaylı bir tedavi kılavuzunda toplanmış 40 yıllık tecrübe
- Yaratıcılık :** Değiştirilmiş veya kişiselleştirilmiş tedavileriniz basitçe hafızada saklanır
- Tercih :** İstediniz an "favoriler" butonundan tercih ettiğiniz programlara doğrudan erişim sağlayabilirsiniz

Soleoline cihazının yüksek performansı ve sadeliği, kullanıcıların hastalarını memnun edecek şekilde üst düzey tedaviler sunacağının garantisidir. Ayar yapmakla daha az, hastalarınızla daha çok ilgilenin. İşte Soleoline farkı!

Soleo **SonoStim**, Kombine Bir Cihaz - Ama Çok Kolay!

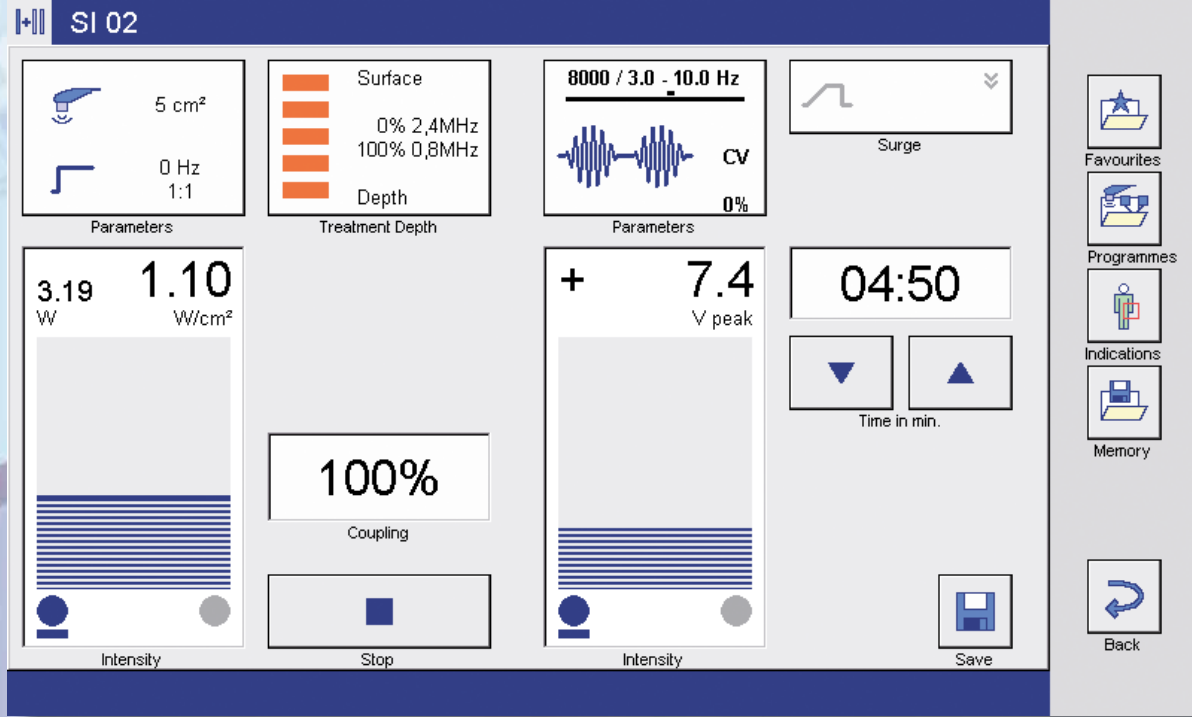

Özel Programlar

Sono ve *Galva* versiyonlarının birleşimi ile rakipsiz bir tedavi programı çeşitliliğini garanti eder. Ultrason terapisi ve elektroterapiye ek olarak, *SonoStim* eşsiz kombine tedaviler de sunar.



Hafıza

SD hafıza kartı, programlar ve kişiselleştirilmiş 1 veya 2 kanal ile birleşik tedavilerin bile saklanması için tasarlanmıştır. Uygulamacıların *SonoStim*'in kapasitesinin tümünü kullanması ve hastaların tedavi parametrelerini kolayca takip etmesini sağlayan modern bir çözümdür.



Tedavi Kılavuzu

Anatomik bölgeye göre hızlı seçim, lokomotor sistemi etkileyen durumlar için 300'den fazla tedavi önerisine erişim sağlar. *SonoStim*'in tedavi programları ile miyofasiyal ağrılar için de özel birleşik tedaviler sunulur.


TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ

SSM GROUP İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.
 Eti Mah. Strazburg Cd. No: 10/A
 Sıhhiye, Ankara, Türkiye
 Tel : +90 (312) 435 21 66
 Fax : +90 (312) 432 49 54
 E-mail : info@ssm.com.tr

Teknik Özellikler
Ultrason terapi versiyonu

Frekanslar
 Ultrason başlığı

Azami güç emilimi
 Modlar

SonoSwing butonu
 Kuplaj
 Programlar
 Ayarlar
 Kullanım Kılavuzu

Sono

0,8 MHz: derin etki / 2,4 MHz: yüzeysel etki
 5 cm² çoklu frekanslı su geçirmez başlık için 1 soket,
 (Opsiyonel ilave olarak 1 cm² bir başlık)
 5 cm² başlık için 3 W/cm²
 Sürekli ve kesikli 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz
 Kesikli: 1/2, 1/3, 1/5, 1/10
 Etki derinliği seçimi
 Görsel (2 renk) ve ses
 9 özel program
 Dokunmatik ekrandan tüm parametrelere ulaşılabilir.
 50'den fazla terapi endikasyonu

Elektroterapi versiyonu

Kanallar
 Elektroterapi
 Akım çeşitleri
 Programlar
 Özel modüller
 Ayarlar
 Kullanım Kılavuzu

Galva

2 bağımsız kanal (programlar, yoğunlukları, parametreler)
 Senkronize, Alternatif, Ayır, Paralel
 Galvanik, LF, Bifazik, MF, MF/LF, Interferansiyel
 100'den fazla özel program
 Kas rehabilitasyonu / Spor rehabilitasyonu
 Dokunmatik ekrandan tüm parametrelere ulaşılabilir
 120'den fazla terapi endikasyonu

Kombine versiyon

Genel özellikler
 Programlar
 Kullanım Kılavuzu

SonoStim = Sono + Galva

Sono ve Galva ile aynı özellikler
 5'i birleşik terapi için olmak üzere 110'dan fazla program
 300'den fazla terapi endikasyonu

Soleoline

SD hafıza kartı
 Aksesuar desteği
 Boyutlar

Tüm versiyonlar için

1 GB SD hafıza kartı / 120 hafıza alanı + 120 favori alanı
 Tüm versiyonlarda 2 destek sağlanmaktadır
 En 33 cm / Boy 13 cm / Derinlik 22 cm / Ağırlık 2 kg

Vaco ekipmanı

İşletim modları
 Kanallar
 Uygulama vakumu
 Kullanım
 Kontrol
 Boyutlar

Galva veya SonoStim versiyonu için Vaco S

1 ile 8 saniye arasında sürekli ve kesikli
 2 bağımsız kanal
 1 ile 60 kPa arasında ayarlanabilir
 16 kPa seviyesine ön ayarlı bir uygulama ile basitleştirilmiş
 Galva veya SonoStim cihazlarının dokunmatik ekranından
 En 33 cm / Boy 13 cm / Derinlik 22 cm / Ağırlık 2 kg

Seçenekler / aksesuarlar

Taşıma Sehpası
 Elektrotlar
 Uzaktan kontrol

Cam tepsili, 1 çekmece + 1 cam raf
 Zimmer'in yapışkan elektrotları
 Kablosuz; 2 kanallı, Yoğunluk ile Başlatma / Durdurma